

micropipetas electrónicas



Última actualización de una exitosa línea que hace que el pipeteado electrónico sea más versátil, sencillo y seguro que nunca.

Características de la Acura® electro:

- Ergonomía optimizada, ligera
- Programa de autoaprendizaje fácil e intuitivo
- Gran display de visualización reversible para lectura izquierda /derecha
- Batería rápidamente intercambiable
- Carga rápida, gran autonomía de trabajo
- Eyector ajustable* que se adapta a la mayoría de las puntas
- Contador de ciclo de pipeteado
- Módulos volumétricos intercambiables – todos se adaptan a la misma unidad de control.

* Patentado por Socorex



Modelos Acura® electro

926XS **936** **956**
micro macro multi

con
NUEVAS
prestaciones



► Ergonomía natural

La pipeta Acura® electro ofrece una forma, un equilibrio y una ergonomía de trabajo semejantes a las de las pipetas manuales. Sin embargo se ha mejorado tanto la comodidad de uso, que el pipeteado y la coherencia de los resultados son excelentes.



► Display exclusivo de visualización para zurdos o diestros

El display pasa instantáneamente de la lectura hacia la derecha a la lectura hacia la izquierda. Toda la información se presenta claramente y es visible de un vistazo durante las etapas de programación, pipeteado y calibración.



► Velocidad de pipeteado regulable

El selector de velocidad, situado en la parte frontal, permite un cambio inmediato de la velocidad incluso durante el proceso de pipeteado. Además, en cualquier momento, se puede activar la velocidad más baja pulsando el botón de puesta en marcha.



► Gran autonomía de trabajo

El pack de batería NiMH se puede extraer y cambiar instantáneamente. Carga rápida de la batería (<1,5 horas) y gran autonomía de trabajo. (> 3000 ciclos de pipeteado consecutivos). El nivel de carga de la batería se visualiza claramente en el display. Modo automático de ahorro de energía o stand-by cuando no se está utilizando.

El instrumento controlado por microprocesador incluye un software intuitivo que evita todas las etapas complicadas de la programación. No es necesario tener aptitudes especiales para acceder rápidamente a seis modos de trabajo y seleccionar entre muchos volúmenes. Su rendimiento y estabilidad son insuperables.

Micropipetas

- La reducción de la longitud del mango y el extremo cónico facilitan el manejo y el acceso a los microtubos y a las microplacas
- Módulos volumétricos opcionales más largos.
- El usuario puede realizar una conversión sencilla en cualquier momento

926XS micro



0.1 - 2 µl
0.5 - 10 µl
1 - 20 µl
2.5 - 50 µl
5 - 100 µl
10 - 200 µl
50 - 1000 µl

Macropipetas

- Filtro de protección de la boquilla intercambiable
- Adaptadores para pipeta Pasteur y puntas tipo pajita
- Exactitud y precisión excepcionales

936 macro



0.1 - 2 ml
0.25 - 5 ml
0.5 - 10 ml

Soporte cargador de pipetas

Permite cargar y almacenar hasta tres pipetas electrónicas o baterías simultáneamente. Cada posición está provista de un LED de carga rojo/verde. Se suministra un soporte con cada pack inicial Acura® electro.



ENERGY STAR®
batería calificada
para un ambiente mejor

Soporte cargador de baterías

Ahorra espacio y permite cargar hasta tres baterías simultáneamente. El accesorio ideal para cargar y guardar baterías de recambio, disponibles en cualquier momento.



Pipetas Multicanal

- Amplia selección de modelos de 8 y de 12 canales
- Ligereza y perfecta manejabilidad
- Eyección secuencial de la punta
- También se puede instalar un módulo volumétrico de un solo canal

956
multi

El sonido puede ser activado/desactivado en cualquier momento.

0.5 - 10 µl
2.5 - 50 µl
10 - 200 µl
20 - 350 µl

Rendimiento

| Volumen | División | Inexactitud (%E) | | | Imprecisión (%CV) | | | Tipo de Punta |
|-----------------------------------|----------|-------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|---------------|
| | | Vol. mín. | Vol. medio | Vol. máx. | Vol. mín. | Vol. medio | Vol. máx. | |
| Micropipetas Acura® electro 926XS | | | | | | | | |
| 0.1 – 2 µl | 0.01 µl | < ± 2.5 % ¹⁾ | < ± 1.2 % | < ± 0.9 % | < 2.5 % ¹⁾ | < 1.5 % | < 0.8 % | Ultra 10 µl |
| 0.5 - 10 µl | 0.05 µl | < ± 1.2 % ²⁾ | < ± 0.8 % | < ± 0.6 % | < 1.5 % ²⁾ | < 0.7 % | < 0.35 % | Ultra 10 µl |
| 0.5 - 10 µl | 0.05 µl | < ± 1.2 % ²⁾ | < ± 0.8 % | < ± 0.6 % | < 1.7 % ²⁾ | < 0.8 % | < 0.4 % | 200 µl |
| 1 - 20 µl | 0.1 µl | < ± 1.2 % ²⁾ | < ± 0.6 % | < ± 0.5 % | < 1.2 % ²⁾ | < 0.4 % | < 0.3 % | 200 µl |
| 2.5 - 50 µl | 0.25 µl | < ± 1.0 % ²⁾ | < ± 0.6 % | < ± 0.5 % | < 0.7 % ²⁾ | < 0.3 % | < 0.25 % | 200 µl |
| 5 - 100 µl | 0.5 µl | < ± 1.0 % ²⁾ | < ± 0.6 % | < ± 0.5 % | < 0.7 % ²⁾ | < 0.3 % | < 0.2 % | 200 µl |
| 10 - 200 µl | 1.0 µl | < ± 1.0 % ²⁾ | < ± 0.6 % | < ± 0.4 % | < 0.6 % ²⁾ | < 0.2 % | < 0.15 % | 200 µl |
| 50 - 1000 µl | 5.0 µl | < ± 0.8 % ²⁾ | < ± 0.5 % | < ± 0.4 % | < 0.4 % ²⁾ | < 0.15 % | < 0.1 % | 1000 µl |

Macropipetas Acura® electro 936

| | | | | | | | | |
|-------------|---------|-------------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------|----------|-------|
| 0.1 - 2 ml | 0.01 ml | < ± 1.5 % ²⁾ | < ± 1.0 % | < ± 0.5 % | < 0.6 % ²⁾ | < 0.3 % | < 0.15 % | 2 ml |
| 0.25 - 5 ml | 0.05 ml | < ± 1.2 % ²⁾ | < ± 0.8 % | < ± 0.5 % | < 0.6 % ²⁾ | < 0.3 % | < 0.15 % | 5 ml |
| 0.5 - 10 ml | 0.05 ml | < ± 1.0 % ²⁾ | < ± 0.7 % | < ± 0.5 % | < 0.5 % ²⁾ | < 0.2 % | < 0.15 % | 10 ml |

Pipetas multicanal Acura® electro 956

| | | | | | | | | |
|-------------|---------|-------------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------|----------|-------------|
| 0.5 - 10 µl | 0.05 µl | < ± 3.5 % ²⁾ | < ± 1.5 % | < ± 1.0 % | < 3.0 % ²⁾ | < 0.9 % | < 0.7 % | Ultra 10 µl |
| 2.5 - 50 µl | 0.25 µl | < ± 1.0 % ²⁾ | < ± 0.9 % | < ± 0.8 % | < 1.0 % ²⁾ | < 0.6 % | < 0.4 % | 200 µl |
| 10 - 200 µl | 1.0 µl | < ± 0.9 % ²⁾ | < ± 0.7 % | < ± 0.6 % | < 0.6 % ²⁾ | < 0.4 % | < 0.25 % | 200 µl |
| 20 - 350 µl | 5.0 µl | < ± 1.0 % ²⁾ | < ± 0.8 % | < ± 0.6 % | < 0.6 % ²⁾ | < 0.4 % | < 0.25 % | 350 µl |


Valores obtenidos en Modo Avanzado con agua bidestilada a temperatura constante (± 0.5°C) comprendida entre 20 y 25°C según la norma ISO 8655. Rendimiento medido a:

¹⁾ 0.5 µl, ²⁾ 10% del volumen nominal




► Eyección de la punta - más fácil que nunca

Mayor eficacia del eyector de puntas gracias a un cómodo botón de eyección ergonómicamente posicionado. El sistema de ajuste de la altura del eje, llamado Justip™ (intervalo de 4 mm) y controlado mediante eficaces dispositivos de retención, permite utilizar una amplia gama de puntas que se ajustan a la boquilla a presión.

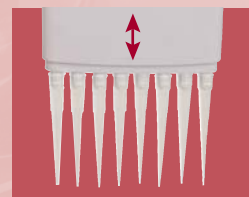

La forma curvada de la cabeza del eyector en el modelo multicanal, permite una eyección de las puntas secuencial y sin esfuerzo.

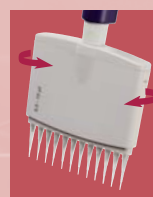

► Óptima posición de trabajo

La rotación de 360° de los módulos volumétricos multicanal permite seleccionar la mejor posición de trabajo.


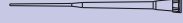

















► Contador de ciclo de pipeteado

Un sencillo doble clic permite acceder al número de ciclos de pipeteado efectuados desde la última puesta a cero.








Puntas de pipeta Qualitips®

Estas puntas de pipeta de alta calidad cubren un rango de 0,1 µl a 10 ml. Todos los modelos son esterilizables en autoclavable. Se ajustan de forma totalmente hermética en las pipetas Socorex y son extraordinariamente adaptables a otras marcas.

| Descripción | Volumen | Racks | Código | Bolsa | Código | Longitud | |
|--|---------|--------------|------------|-----------------|-----------|----------|---|
| Micropunta ultra, color natural | 10 µl | 10 x 96/rack | 309.0010R | 1 x 1000/bolsa. | 309.0010B | 31.0 mm |  |
| Punta para carga de gel, color natural | 10 µl | 4 x 204/rack | 302.0010GR | | | 70.9 mm |  |
| Punta, color natural | 10 µl | 10 x 96/rack | 302.0020R | 1 x 1000/bolsa. | 302.0020B | 42.3 mm |  |
| Punta universal, color natural | 200 µl | 10 x 96/rack | 307.0200R | 2 x 500/bolsa. | 307.0200B | 49.4 mm |  |
| Punta universal, color amarillo | 200 µl | 10 x 96/rack | 327.0200R | 2 x 500/bolsa. | 327.0200B | |  |
| Punta, color natural | 200 µl | 10 x 96/rack | 308.0200R | 1 x 1000/bolsa. | 308.0200B | 51.1 mm |  |
| Punta para carga de gel, color natural | 200 µl | 4 x 204/rack | 308.0200GR | | | 69.0 mm |  |
| Punta, color natural | 200 µl | 10 x 96/rack | 309.0200R | 2 x 500/bolsa. | 309.0200B | 49.7 mm |  |
| Punta, color amarillo | 200 µl | 10 x 96/rack | 329.0200R | 2 x 500/bolsa. | 329.0200B | |  |
| Punta, color natural | 350 µl | 10 x 96/rack | 308.0350R | 1 x 1000/bolsa. | 308.0350B | 58.8 mm |  |
| Punta universal, color natural | 1000 µl | 10 x 60/rack | 307.1000R | 4 x 250/bolsa. | 307.1000B | 79.0 mm |  |
| Punta, color azul | 1000 µl | 10 x 60/rack | 318.1000R | 4 x 250/bolsa. | 318.1000B | 69.5 mm |  |
| Punta, color natural | 1000 µl | 10 x 60/rack | 309.1000R | 4 x 250/bolsa. | 309.1000B | 72.0 mm |  |
| Punta, color azul | 1000 µl | 10 x 60/rack | 319.1000R | 4 x 250/bolsa. | 319.1000B | |  |
| Macropunta, color natural | 2 ml | | | 2 x 250/bolsa. | 312.02 | 115.5 mm |  |
| Macropunta, color natural | 5 ml | 2 x 50/rack | 312.05R | 2 x 250/bolsa. | 312.05B | 123.2 mm |  |
| Micropunta ultra, color natural | 10 ml | 4 x Rack | 312.10ER | 3 x 100/bolsa. | 312.10 | 150.0 mm |  |

Qualitips® con filtro

Protección eficiente frente a aerosoles. Incluyen un filtro de PE de alta densidad que permite la recuperación completa de muestras no contaminadas. Certificación de ausencia de DNAsa y RNAsa. Las puntas estériles están garantizadas sin pirógeno.

| Descripción | Volumen | Racks | Código | Bolsa | Código | Longitud | |
|---------------------------------|---------|---------------|-------------|-----------------|-------------|----------|---|
| Micropunta ultra estéril | 10 µl | 10 x 96/rack | 309.0010FR | | | 31.0 mm |  |
| Micropunta estéril | 10 µl | 10 x 100/rack | 302.0010FR | | | 45.6 mm |  |
| Micropunta autoclavable | 10 µl | | 302.0010AFR | 1 x 1000/bolsa. | 302.0010AFB | |  |
| Punta estéril | 20 µl | 10 x 96/rack | 308.0020FR | 5 x 100/bolsa. | 308.0020FS | 51.0 mm |  |
| Punta autoclavable | 20 µl | 4 x 204/rack | 308.0020GFR | | | 69.0 mm |  |
| Punta estéril para carga de gel | 100 µl | 10 x 96/rack | 308.0100FR | | | 54.1 mm |  |
| Punta estéril | 100 µl | 4 x 204/rack | 308.0100GFR | | | 69.0 mm |  |
| Punta autoclavable | 200 µl | 4 x 204/rack | 308.0200IFR | 5 x 100/bolsa. | 308.0200IFS | 90.9 mm |  |
| Punta estéril para carga de gel | 300 µl | 10 x 96/rack | 308.0300FR | | | 58.8 mm |  |
| Punta alargada estéril | 300 µl | | | 1 x 1000/bolsa. | 308.0300AFB | |  |
| Punta estéril | 1000 µl | 10 x 100/rack | 309.1000FR | 5 x 100/bolsa. | 309.1000FS | 88.6 mm |  |
| Punta autoclavable | 1000 µl | | | 1 x 1000/bolsa. | 309.1000AFB | |  |

B = Bolsa, F = Filtro, G = Carga de gel, L = Alargada, R = Rack, S = Envase individual, A = Autoclavable

Recipientes todo uso

Especialmente adaptados para las pipetas multicanal, los recipientes para reactivos están disponibles en diversas formas, materiales y capacidades a un precio económico.

| Material | Volumen | Tipo | Tapa | Esterilizado | Presentación | Código |
|----------|---------|------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| PP | 70 ml | Forma en V | No | No | 20/pack | 330.01 |
| PP | 125 ml | Forma en V | con bisagras | No | 20/pack | 330.01L |
| PE | 48 ml | 8 canales | No | Si | 10x 1/pack | 330.08.9 |
| PE | 48 ml | 12 canales | No | Si | 10x 1/pack | 330.12.9 |

Filtros protección de boquilla

| Descripción | Present. | Código |
|--------------------------|----------|--------|
| Para modelos de 2 y 5 ml | 250/pack | 322.05 |
| Para modelos de 10 ml | 100/pack | 322.10 |

Adaptadores para pipetas Pasteur

| Descripción | Present. | Código |
|----------------------|----------|-----------|
| Para modelos de 2 ml | 1 / pack | 1.835.631 |
| Para modelos de 5 ml | 1 / pack | 1.835.633 |

Gran flexibilidad de trabajo incorporada

Recorra el modo de selección presionando un solo botón.

FORWRd

- **Modo avanzado**

Aspiración y pipeteado de un volumen fijo. Adecuado para todas las aplicaciones.

REVERS

- **Modo reversible**

Aspiración en exceso seguida por la dosificación de un volumen fijo. Mejora la reproductibilidad por debajo de 20 µl. Especialmente recomendado para líquidos viscosos y espumosos.

STEP

- **Modo gradual**

Llenado de la punta y distribución gradual. Apropiado para muestras alicuotas.

DILUTE

- **Modo dilución**

Aspiración de 2 o 3 volúmenes diferentes para restitución en una sola inyección. Una manera fácil de diluir muestras.

TACTIL

- **Modo táctil**

Iniciar y detener la medición del líquido, valorar y transferir gel con sólo pulsar un botón.

MIXING

- **Mezclado**

Flujo de líquido “arriba y abajo” en la punta / vial.

Módulos volumétricos intercambiables

Una sola unidad de control se adapta a una serie de 27 módulos volumétricos disponibles por separado. Esto amplía las posibilidades de trabajo y hace que el pipeteado electrónico sea asequible para todos los presupuestos. La posibilidad de montar y desmontar sin ninguna herramienta contribuye a una mayor flexibilidad.




Las características de calibración de los módulos adicionales, fijadas por el control de calidad de fábrica o por el propietario de pipeta, quedan registradas en la memoria del instrumento.



► Pack inicial

Recomendado cuando se compra un Acura® electro por primera vez, cada pack inicial incluye: una pipeta electrónica, un certificado de Control de Calidad y un manual de instrucciones, un soporte cargador, fuente de alimentación, un pack de batería adicional y muestras de puntas de pipeta Qualitips®. Posteriormente se pueden comprar pipetas adicionales individualmente y cargarlas en el soporte existente.

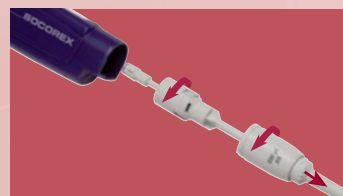

► Tiempo de mantenimiento eficiente

La construcción de la pipeta limita el mantenimiento al mínimo. No se necesita ninguna herramienta para retirar el módulo volumétrico. El contador de ciclo de pipeteado facilita el seguimiento del mantenimiento. Cada vez que la esterilización sea necesaria, los módulos volumétricos se pueden poner en un autoclave a 121°C / 250°F.



► Calibración

El software de control permite acceder inmediatamente al menú de calibración. La verificación del funcionamiento es posible sobre dos o tres volúmenes independientes (Vmin, Vmed y Vmax). Los nuevos ajustes se realizan directamente en el teclado del instrumento. Un mensaje de error avisa sobre cualquier movimiento inexacto del émbolo.



► Tono del teclado

El sonido puede ser activado/desactivado en cualquier momento.



micropipetas electrónicas

Información de pedido - Instrumento

El pack inicial incluye, pipeta, soporte de carga y accesorios. Las pipetas adicionales (individuales) se suministran con certificado de control de calidad individual, muestras de puntas de pipeta Qualitips[®] y manual de instrucciones.

| Volumen | División | Tipo de Punta | Código Pack inicial* | Código Pipeta individual |
|---|----------|---------------|----------------------|--------------------------|
| Micropipetas Acura[®] electro 926XS | | | | |
| 0.1 - 2 µl | 0.01 µl | Ultra 10 µl | 926.0002E | 926.0002 |
| 0.5 - 10 µl | 0.05 µl | Ultra 10 µl | 926.0010E | 926.0010 |
| 0.5 - 10 µl | 0.05 µl | 200 µl | 926.0010YE | 926.0010Y |
| 1 - 20 µl | 0.1 µl | 200 µl | 926.0020E | 926.0020 |
| 2.5 - 50 µl | 0.25 µl | 200 µl | 926.0050E | 926.0050 |
| 5 - 100 µl | 0.5 µl | 200 µl | 926.0100E | 926.0100 |
| 10 - 200 µl | 1.0 µl | 200 µl | 926.0200E | 926.0200 |
| 50 - 1000 µl | 5.0 µl | 1000 µl | 926.1000E | 926.1000 |
| Macropipetas Acura[®] electro 936 | | | | |
| 0.1 - 2 ml | 0.01 ml | 2 ml | 936.02E | 936.02 |
| 0.25 - 5 ml | 0.05 ml | 5 ml | 936.05E | 936.05 |
| 0.5 - 10 ml | 0.05 ml | 10 ml | 936.10E | 936.10 |

| | | | | |
|--|---------|-------------|-------------|------------|
| Pipetas de 8 canales Acura[®] electro 956 | | | | |
| 0.5 - 10 µl | 0.05 µl | Ultra 10 µl | 956.08.010E | 956.08.010 |
| 2.5 - 50 µl | 0.25 µl | 200 µl | 956.08.050E | 956.08.050 |
| 10 - 200 µl | 1.0 µl | 200 µl | 956.08.200E | 956.08.200 |
| 20 - 350 µl | 5.0 µl | 350 µl | 956.08.350E | 956.08.350 |
| Pipetas de 12 canales Acura[®] electro 956 | | | | |
| 0.5 - 10 µl | 0.05 µl | Ultra 10 µl | 956.12.010E | 956.12.010 |
| 2.5 - 50 µl | 0.25 µl | 200 µl | 956.12.050E | 956.12.050 |
| 10 - 200 µl | 1.0 µl | 200 µl | 956.12.200E | 956.12.200 |
| 20 - 350 µl | 5.0 µl | 350 µl | 956.12.350E | 956.12.350 |

* Sustituya E por el código de país si necesita otro tipo de enchufe que el tipo europeo:
G = Reino Unido, U = EEUU-Japón, A = Australia-Nueva Zelanda

Información para pedido - Módulos volumétricos y accesorios

| Gama de vol. | Código | Gama de vol. | Código | Gama de vol. | Código |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| Microvolúmenes un solo canal | | Microvolúmenes un solo canal | | Macrovolúmenes un solo canal | |
| Longitud de mango reducida | | Longitud de mango normal | | | |
| 0.1 - 2 µl | 800.0002XS | 0.1 - 2 µl | 800.0002 | 0.1 - 2 ml | 800.2000 |
| 0.5 - 10 µl | 800.0010XS | 0.5 - 10 µl | 800.0010 | 0.25 - 5 ml | 800.5000 |
| 0.5 - 10 µl* | 800.0010YXS | 0.5 - 10 µl* | 800.0010Y | 0.5 - 10 ml | 800.10000 |
| 1 - 20 µl | 800.0020XS | 1 - 20 µl | 800.0020 | Microvolúmenes 8 canales | |
| 2.5 - 50 µl | 800.0050XS | 2.5 - 50 µl | 800.0050 | 0.5 - 10 µl | 800.08.010 |
| 5 - 100 µl | 800.0100XS | 5 - 100 µl | 800.0100 | 2.5 - 50 µl | 800.08.050 |
| 10 - 200 µl | 800.0200XS | 10 - 200 µl | 800.0200 | 10 - 200 µl | 800.08.200 |
| 50 - 1000 µl | 800.1000XS | 50 - 1000 µl | 800.1000 | 20 - 350 µl | 800.08.350 |
| | | | | Microvolúmenes 12 canales | |
| | | | | 0.5 - 10 µl | 800.12.010 |
| | | | | 2.5 - 50 µl | 800.12.050 |
| | | | | 10 - 200 µl | 800.12.200 |
| | | | | 20 - 350 µl | 800.12.350 |

*Tipo de punta 200 µl

| Descripción | Presentación | Código |
|---|--------------|------------|
| Unidades de carga, 3 posiciones | | |
| Soporte cargador para pipetas o packs de baterías | 1 / pack | 320.903.48 |
| Soporte cargador sólo para packs de baterías | 1 / pack | 320.913.48 |
| Batería de repuesto, color azul | | |
| NiMH, 4.8V | 1 / pack | 900.920.48 |
| NiMH, 4.8V | 2 / pack | 900.922.48 |

| Descripción | Present. | Código |
|---|----------|-------------|
| Fuente de alimentación, 100-240V | | |
| Enchufe tipo Europeo | 1 / pack | 900.901.48E |
| Enchufe tipo Reino Unido | 1 / pack | 900.901.48G |
| Enchufe tipo EEUU-Japón | 1 / pack | 900.901.48U |
| Enchufe tipo Australia-Nueva Zelanda | 1 / pack | 900.901.48A |

Normas y cumplimiento

Las pipetas Acura[®] electro han sido diseñadas para funcionar conforme a normas nacionales e internacionales tales como EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. Cumplen las siguientes normas:

- IVD 98/79 ECC (dispositivos médicos para diagnóstico in vitro)
- ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCC-CFR47, part 15 (compatibilidad electromagnética)
- ED 73/23 EEC, 93/68 EEC, IEC 61010-1 (seguridad eléctrica)
- ED 2002/95/EC Restricción de sustancias peligrosas (RoHS)



Control calidad, seguridad y garantía

Cada instrumento tiene asignado un número de serie y pasa un estricto control de calibración, garantizado por un certificado de control de calidad individual. Remítase a la documentación suministrada con el instrumento sobre las precauciones en materia de seguridad, las instrucciones de uso y las condiciones de garantía.



Los productos y especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.



SOCOREX
SWISS

SOCOREX ISBA SA
Champ-Colomb 7, P.O. Box
1024 Ecublens/Lausanne
Suiza
socorex@socorex.com
www.socorex.com
Tel. +41 (0)21 651 6000
Fax +41 (0)21 651 6001